



GENESIS CONTAINER

CD-B・C Series / CR Series

ジェネシス コンテナ
CD-B・Cシリーズ/CRシリーズ

ジェネシスコンテナ

CD-B.C シリーズ[※]

エチレンオキサイド滅菌 (EOG) 及び蒸気滅菌器での使用に適応する滅菌コンテナです。

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌[※]

※座穴無しコンテナはEOG滅菌には適応していません。



●コンテナは積み重ねが可能です。




●ラッチは蓋を開けるとはねあがり、蓋のハンドル(取っ手)になり、取り外しが容易です。


Genesis
Container
System

Genesis Container


特長

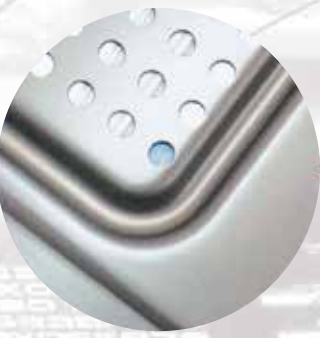


●フィルター保持板のホールは中心点をずらしてあるので、フィルターの穴あきを防止します。




●ガスケットがあるので密閉を保ちます。




●IDタグは入れかえが出来て様々な識別が可能です。



●コンテナは一体加工でリベットを使用していないので破損しにくい構造です。また、ハード陽極処理を施しており、気密性が優れています。



●キャリングハンドルは大きく、上に90度まで上がりシリコンカバーが付いていて、持ち運びに便利です。



●アロー型インジケーターで滅菌後の誤開放を防止します。

CD-B-C Series GE

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌※

コンテナ



●ハーフサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-03	CD1-4C	300×314×114	248×289×107	底穴なし※
08-630-04	CD1-5C	300×314×135	248×289×129	底穴なし※
08-630-05	CD1-6C	300×314×154	248×289×148	底穴なし
08-631-03	CD1-4B	300×314×114	248×289×107	底穴あり
08-631-04	CD1-5B	300×314×135	248×289×129	底穴あり
08-631-05	CD1-6B	300×314×154	248×289×148	底穴あり



●ミッドサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-06	CD2-4C	488×314×114	436×289×107	底穴なし※
08-630-07	CD2-5C	488×314×135	436×289×129	底穴なし※
08-630-08	CD2-6C	488×314×154	436×289×148	底穴なし※
08-630-09	CD2-8C	488×314×198	436×289×191	底穴なし
08-631-06	CD2-4B	488×314×114	436×289×107	底穴あり
08-631-07	CD2-5B	488×314×135	436×289×129	底穴あり
08-631-08	CD2-6B	488×314×154	436×289×148	底穴あり
08-631-09	CD2-8B	488×314×198	436×289×191	底穴あり



●フルサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-10	CD3-4C	586×314×114	533×289×107	底穴なし※
08-630-11	CD3-5C	586×314×135	533×289×129	底穴なし※
08-630-12	CD3-6C	586×314×154	533×289×148	底穴なし※
08-630-13	CD3-7C	586×314×179	533×289×172	底穴なし※
08-631-10	CD3-4B	586×314×114	547×289×107	底穴あり
08-631-11	CD3-5B	586×314×135	533×289×129	底穴あり
08-631-12	CD3-6B	586×314×154	533×289×148	底穴あり
08-631-13	CD3-7B	586×314×179	533×289×172	底穴あり



●レトラクターサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-16	CD6-6C	673×432×176	610×388×170	底穴なし※
08-631-16	CD6-6B	673×432×176	610×388×170	底穴あり

NEESIS CONTAINER

Genesis
Container
System



●ミニサイズコンテナ(プロテクタープレートなし)

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-631-01	CD0-3B	260×183×80	233×129×78	底穴あり



●クォーターサイズコンテナ

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-02	CD0-4C	240×314×95	194×295×89	底穴なし※
08-631-02	CD0-4B	240×314×95	194×295×89	底穴あり



●エンドサイズコンテナ(スモール/S・ラージ/L)

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-631-14	CD4-5B	529×184×133	483×165×127	底穴あり
08-631-15	CD5-61B	714×284×163	673×216×159	底穴あり

※ 底穴無しコンテナはE0G滅菌には適応しておりません。

CR Series GENESIS CONTAINER

回収用

※CRシリーズは回収用です。滅菌には使用できません。



●リムーバルコンテナ(回収・密封用)

商品コード	Genesis No.	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-632-01	CR1-6	300×314×154	248×289×148	回収・密封用
08-632-02	CR2-6	488×314×154	436×289×148	回収・密封用
08-632-03	CR3-6	586×314×154	533×289×148	回収・密封用

GENESIS BA

バスケット

- 1.足が付いているので、保持板を傷つけません。
- 2.バスケットのハンドルには、バーティカルとスタンダードの2タイプあります。
- 3.バスケットのハンドルが垂直に上がる為、邪魔になりません。(バーティカルハンドルのみ)
- 4.バスケットの表面は電解研磨をしており、耐腐食性に優れ器具類にキズが付きにくいです。

(ハンドルタイプ)



バーティカルタイプ

※バーティカルハンドルはスタンダードハンドルに変更出来ます。発注の際にご用命ください。



スタンダードタイプ



(パンチングバスケット)

- 1.ドレープでも包み易い形状になっています。
- 2.器具類が引っ掛かりにくいので、マイクロ・微細器具セットの格納に適しています。

パンチングバスケット



●ハーフサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-02	BP1-2V	234×267×50	バーティカルハンドル
08-636-03	BP1-3V	234×267×76	バーティカルハンドル
08-636-04	BP1-4V	234×267×100	バーティカルハンドル



●ミッドサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-05	BP2-2V	420×267×50	バーティカルハンドル
08-636-06	BP2-3V	420×267×76	バーティカルハンドル
08-636-07	BP2-4V	420×267×100	バーティカルハンドル
08-635-09	BP2-6A	420×267×152	スタンダードハンドル



●フルサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-09	BP3-2V	520×267×50	バーティカルハンドル
08-636-10	BP3-3V	520×267×76	バーティカルハンドル
08-636-11	BP3-4V	520×267×100	バーティカルハンドル
08-636-12	BP3-5V	520×267×127	バーティカルハンドル

SKET LINE UP



●レトラクターサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-635-18	BP6-4A	584×380×110	スタンダードハンドル



●ミニサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-635-01	BP0-1A	229×127×44	スタンダードハンドル



●クォーターサイズバスケット

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-01	BP0-2V	178×279×50	パーティカルハンドル



●エンドサイズバスケット(スモール/S・ラージ/L)

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-13	BP4-2V	470×152×50	(S)パーティカルハンドル
08-636-14	BP4-4V	470×152×100	(S)パーティカルハンドル
08-636-15	BP5-2V	660×203×50	(L)パーティカルハンドル
08-636-16	BP5-4V	660×203×100	(L)パーティカルハンドル



スタッキングバスケット(積み重ね用)



●ハーフサイズ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-637-01	BP1-1AS	229×254×25	スタンダードハンドル
08-637-09	BP1-2VS	229×254×50	パーティカルハンドル

●ミッドサイズ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-637-03	BP2-1AS	413×254×25	スタンダードハンドル
08-637-10	BP2-2VS	413×254×50	パーティカルハンドル

●フルサイズ

商品コード	Genesis No.	サイズL×W×H(mm)	ハンドル形状
08-637-05	BP3-1AS	527×254×25	スタンダードハンドル
08-637-11	BP3-2VS	527×254×50	パーティカルハンドル

GENESIS

CD-B・C/CR Series アクセサリー


※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用アクセサリー品をご使用ください。



●蒸気滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-03	AS2-2	500本
08-639-04	AS2-3	1000本

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

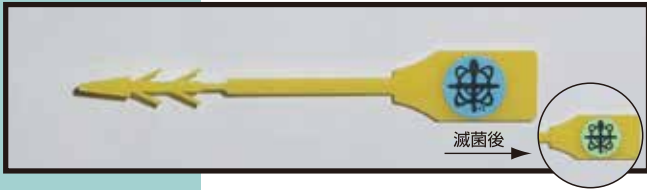

●EOG滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-02	AG2-2	500本入

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)



●フィルターペーパー (蒸気滅菌・EOG滅菌・過酸化水素プラズマ滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	数量
08-640-17	DST-1	ミニサイズ用 500枚入
08-640-18	DST-2	クォーターサイズ用 500枚入
08-640-19	DST-3	ハーフ/ミッド/フル/レトラクターサイズ用1000枚入


※CD-B・C/CD-ST シリーズ共通フィルターです。



●データカード (蒸気滅菌・EOG滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	数量
08-641-01	MD1-1	500枚入

注:過酸化水素プラズマ滅菌には、使用できません。

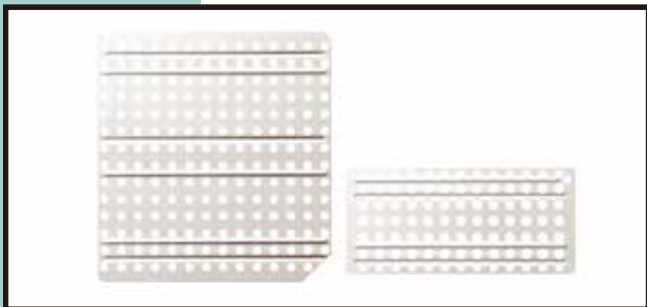

●フィルター保護板 (蒸気滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	規格
08-661-11	RP30-2	ハーフ/ミッド/フル用
08-661-18	R1190	クォーター用
08-661-21	R1384	エンドサイズスモール用

注:過酸化水素プラズマ滅菌・EOG滅菌には、使用できません。
フルサイズに使用するには2枚必要になります。


●CD-B・Cシリーズのコンテナ本体及びアクセサリー品は、過酸化水素プラズマ滅菌器STERRAD®には使用できません。
●必ず滅菌方法に適合した専用インジケータアローを使用してください。

過酸化水素プラズマ滅菌対応コンテナ専用

CD-ST Series アクセサリー

※CD-ST Seriesは専用アクセサリ品のみ取り扱いとなります。


※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用アクセサリ品をご使用ください。

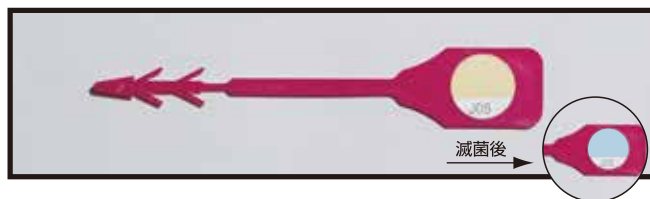

●過酸化水素プラズマ滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-11	AH2-1	150本入

注:本製品の箱表面に有効期限が記載されています。
有効期限の過ぎた製品は、使用しないでください。
注:湿気が無く涼しい場所(15~30℃)で、アルカリや酸性の化学物質から遠ざけて保管してください。

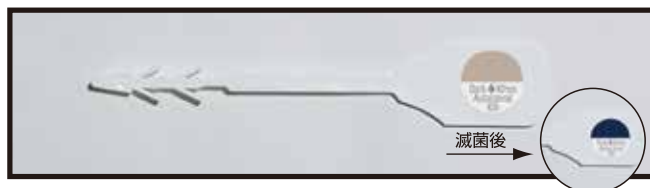

●蒸気滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-03	AS2-2	500本
08-639-04	AS2-3	1000本


注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)



●EOG滅菌専用インジケータアロー

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-02	AG2-2	500本入

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

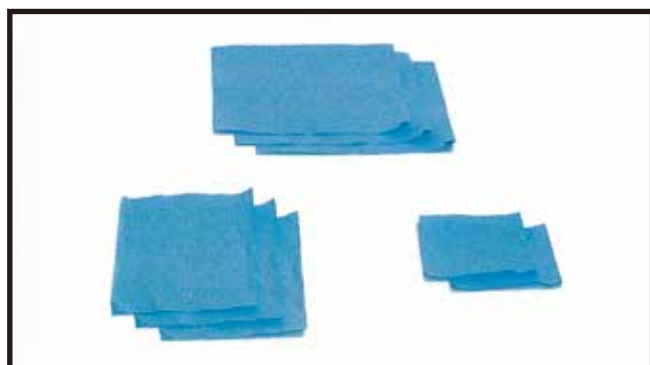

●フィルターペーパー (蒸気滅菌・EOG滅菌・過酸化水素プラズマ滅菌専用)

商品コード	Genesis No.	数量
08-640-17	DST-1	ミニサイズ用 500枚入
08-640-18	DST-2	クォーターサイズ用 500枚入
08-640-19	DST-3	ハーフ/ミッド/フル/レトラクターサイズ用1000枚入

※CD-B・C/CD-ST シリーズ共通フィルターです。



●データカード

商品コード	Genesis No.	数量
08-639-41	MH1-1	500枚入

注:データカードMD1-1は、使用しないでください。

GENESIS

アクセサリ




●コンテナ用IDタグ

商品コード	Genesis No.	規格
08-642-01	TC2-1	黒
08-642-02	TC2-2	青
08-642-03	TC2-3	茶
08-642-04	TC2-4	金
08-642-05	TC2-5	緑
08-642-06	TC2-6	赤
08-642-07	TC2-7	銀
08-642-08	TC2-8	オレンジ
08-642-09	TC2-9	紫



●バスケット用IDタグ

商品コード	Genesis No.	規格
08-643-01	TB1-1	スタンダード 黒
08-643-02	TB1-2	スタンダード 青
08-643-03	TB1-3	スタンダード 茶
08-643-04	TB1-4	スタンダード 金
08-643-05	TB1-5	スタンダード 緑
08-643-06	TB1-6	スタンダード 赤
08-643-07	TB1-7	スタンダード 銀
08-643-08	TB1-8	スタンダード オレンジ
08-643-09	TB1-9	スタンダード 紫
08-643-10	TB2-1	ラージ 黒
08-643-11	TB2-2	ラージ 青
08-643-12	TB2-3	ラージ 茶
08-643-13	TB2-4	ラージ 金
08-643-14	TB2-5	ラージ 緑
08-643-15	TB2-6	ラージ 赤
08-643-16	TB2-7	ラージ 銀
08-643-17	TB2-8	ラージ オレンジ
08-643-18	TB2-9	ラージ 紫
08-643-19	TB3-1	エクストララージ 黒

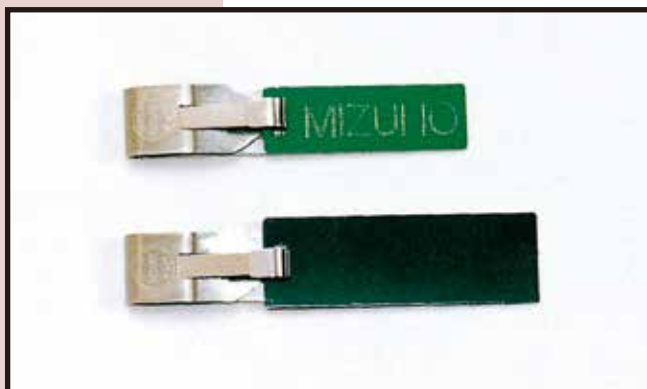



●仕切り板

商品コード	Genesis No.	サイズ(mm)	数量
08-646-01	DP1-1	254×63	1個入
08-646-02	DP1-2	108×63	1個入
08-646-03	DP1-3	254×38	1個入
08-646-04	DP1-4	108×38	1個入
08-646-05	DP1-5	254×19	1個入



●ホールディングピン

商品コード	Genesis No.	サイズ	数量
08-648-01	PP1-1	25mm	1個入
08-648-02	PP1-2	38mm	1個入
08-648-03	PP1-2.5	50mm	1個入
08-648-04	PP1-3	63mm	1個入
08-648-05	PP1-4	89mm	1個入

GENESIS CONTAIN

ジェネシスコンテナシステム明細

■コンテナ

商品コード	Genesis No.	JAN コード	商品名	底穴なし	底穴あり	外寸 L×W×H(mm)	内寸 L×W×H(mm)	規格
08-630-03	CD1-4C	4946329071689	ハーフサイズコンテナ			300×314×114	248×289×107	底穴なし
08-630-04	CD1-5C	4946329071696	ハーフサイズコンテナ			300×314×135	248×289×129	底穴なし
08-630-05	CD1-6C	4946329071702	ハーフサイズコンテナ			300×314×154	248×289×148	底穴なし
08-631-03	CD1-4B	4946329071849	ハーフサイズコンテナ			300×314×114	248×289×107	底穴あり
08-631-04	CD1-5B	4946329071856	ハーフサイズコンテナ			300×314×135	248×289×129	底穴あり
08-631-05	CD1-6B	4946329071863	ハーフサイズコンテナ			300×314×154	248×289×148	底穴あり
08-630-06	CD2-4C	4946329071719	ミッドサイズコンテナ			488×314×114	436×289×107	底穴なし
08-630-07	CD2-5C	4946329071726	ミッドサイズコンテナ			488×314×135	436×289×129	底穴なし
08-630-08	CD2-6C	4946329071733	ミッドサイズコンテナ			488×314×154	436×289×148	底穴なし
08-630-09	CD2-8C	4946329071740	ミッドサイズコンテナ			488×314×198	436×289×191	底穴なし
08-631-06	CD2-4B	4946329071870	ミッドサイズコンテナ			488×314×114	436×289×107	底穴あり
08-631-07	CD2-5B	4946329071887	ミッドサイズコンテナ			488×314×135	436×289×129	底穴あり
08-631-08	CD2-6B	4946329071894	ミッドサイズコンテナ			488×314×154	436×289×148	底穴あり
08-631-09	CD2-8B	4946329071900	ミッドサイズコンテナ			488×314×198	436×289×191	底穴あり
08-630-10	CD3-4C	4946329071757	フルサイズコンテナ			586×314×114	533×289×107	底穴なし
08-630-11	CD3-5C	4946329071764	フルサイズコンテナ			586×314×135	533×289×129	底穴なし
08-630-12	CD3-6C	4946329071771	フルサイズコンテナ			586×314×154	533×289×148	底穴なし
08-630-13	CD3-7C	4946329071788	フルサイズコンテナ			586×314×179	533×289×172	底穴なし
08-631-10	CD3-4B	4946329071917	フルサイズコンテナ			586×314×114	547×289×107	底穴あり
08-631-11	CD3-5B	4946329071924	フルサイズコンテナ			586×314×135	533×289×129	底穴あり
08-631-12	CD3-6B	4946329071931	フルサイズコンテナ			586×314×154	533×289×148	底穴あり
08-631-13	CD3-7B	4946329071948	フルサイズコンテナ			586×314×179	533×289×172	底穴あり
08-630-16	CD6-6C	4946329071818	レトラクターサイズコンテナ			673×432×176	610×388×170	底穴なし
08-631-16	CD6-6B	4946329071979	レトラクターサイズコンテナ			673×432×176	610×388×170	底穴あり
08-631-01	CD0-3B	4946329071825	ミニサイズコンテナ			260×183×80	233×129×78	底穴あり
08-630-02	CD0-4C	4946329071672	クォーターサイズコンテナ			240×314×95	194×295×89	底穴なし
08-631-02	CD0-4B	4946329071832	クォーターサイズコンテナ			240×314×95	194×295×89	底穴あり
08-631-14	CD4-5B	4946329071955	エンドサイズコンテナ	底穴あり	スモール	529×184×133	483×165×127	底穴あり
08-631-15	CD5-61B	4946329071962	エンドサイズコンテナ	底穴あり	ラージ	714×284×163	673×216×159	底穴あり
08-632-01	CR1-6	4946329071986	リムーバルコンテナ		(回収・密封用)	300×314×154	248×289×148	回収・密封用
08-632-02	CR2-6	4946329071993	リムーバルコンテナ		(回収・密封用)	488×314×154	436×289×148	回収・密封用
08-632-03	CR3-6	4946329072006	リムーバルコンテナ		(回収・密封用)	586×314×154	533×289×148	回収・密封用

■バスケット





商品コード	Genesis No.	JAN コード	商品名	サイズ L×W×H(mm)	ハンドル形状
08-636-02	BP1-2V	4946329072334	パンチングバスケット ハーフサイズ	234×267×50	パーティカルハンドル
08-636-03	BP1-3V	4946329072341	パンチングバスケット ハーフサイズ	234×267×76	パーティカルハンドル
08-636-04	BP1-4V	4946329072358	パンチングバスケット ハーフサイズ	234×267×100	パーティカルハンドル
08-636-05	BP2-2V	4946329072365	パンチングバスケット ミッドサイズ	420×267×50	パーティカルハンドル
08-636-06	BP2-3V	4946329072372	パンチングバスケット ミッドサイズ	420×267×76	パーティカルハンドル
08-636-07	BP2-4V	4946329072389	パンチングバスケット ミッドサイズ	420×267×100	パーティカルハンドル
08-635-09	BP2-6A	4946329072228	パンチングバスケット ミッドサイズ	420×267×152	スタンダードハンドル
08-636-09	BP3-2V	4946329072402	パンチングバスケット フルサイズ	520×267×50	パーティカルハンドル
08-636-10	BP3-3V	4946329072419	パンチングバスケット フルサイズ	520×267×76	パーティカルハンドル
08-636-11	BP3-4V	4946329072426	パンチングバスケット フルサイズ	520×267×100	パーティカルハンドル
08-636-12	BP3-5V	4946329072433	パンチングバスケット フルサイズ	520×267×127	パーティカルハンドル
08-635-18	BP6-4A	4946329072310	パンチングバスケット レトラクターサイズ	584×380×110	スタンダードハンドル
08-635-01	BP0-1A	4946329072143	パンチングバスケット ミニサイズ	229×127×44	スタンダードハンドル
08-636-01	BP0-2V	4946329072327	パンチングバスケット クォーターサイズ	178×279×50	パーティカルハンドル
08-636-13	BP4-2V	4946329072440	パンチングバスケット エンドサイズスモール	470×152×50	(S)パーティカルハンドル
08-636-14	BP4-4V	4946329072457	パンチングバスケット エンドサイズスモール	470×152×100	(S)パーティカルハンドル
08-636-15	BP5-2V	4946329072464	パンチングバスケット エンドサイズラージ	660×203×50	(L)パーティカルハンドル
08-636-16	BP5-4V	4946329072471	パンチングバスケット エンドサイズラージ	660×203×100	(L)パーティカルハンドル
08-637-01	BP1-1AS	4946329072495	スタッキングバスケット ハーフサイズ	229×254×25	スタンダードハンドル
08-637-09	BP1-2VS	4946329072570	スタッキングバスケット ハーフサイズ	229×254×50	パーティカルハンドル
08-637-03	BP2-1AS	4946329072518	スタッキングバスケット ミッドサイズ	413×254×25	スタンダードハンドル
08-637-10	BP2-2VS	4946329072587	スタッキングバスケット ミッドサイズ	413×254×50	パーティカルハンドル
08-637-05	BP3-1AS	4946329072532	スタッキングバスケット フルサイズ	527×254×25	スタンダードハンドル
08-637-11	BP3-2VS	4946329072594	スタッキングバスケット フルサイズ	527×254×50	パーティカルハンドル

■アクセサリ

商品コード	Genesis No.	JANコード	商品名	サイズ(mm)	規格または数量
08-639-03	AS2-2	4946329072686	インジケータアロー 蒸気用(白)	—	500本
08-639-04	AS2-3	4946329072693	インジケータアロー 蒸気用(白)	—	1000本
08-639-02	AG2-2	4946329072679	インジケータアロー ガス用(黄)	—	500本入
08-639-11	AH2-1	4946329124484	インジケータアロー プラズマ用(ピンク)	—	150本入
08-640-17	DST-1	4946329215830	フィルターペーパー ミニサイズ用	—	500枚入
08-640-18	DST-2	4946329215847	フィルターペーパー クォーターサイズ用	—	500枚入
08-640-19	DST-3	4946329215854	フィルターペーパー ハーフ/ミッド/フル/レトラクター用	—	1000枚入
08-641-01	MD1-1	4946329072761	データカード(蒸気滅菌・EOG滅菌専用)	—	500枚入
08-639-41	MH1-1	4946329124491	データカード	—	500枚入
08-661-11	RP30-2	4946329074130	フィルター保護板 ハーフ/ミッド/フル用	—	ハーフ/ミッド/フル用
08-661-18	R1190	4946329074208	フィルター保護板 クォーター用	—	クォーター用
08-661-21	R1384	4946329074239	フィルター保護板 エンドサイズスモール用	—	エンドサイズスモール用
08-642-01	TC2-1	4946329072778	コンテナ用IDタグ 黒	—	1個入
08-642-02	TC2-2	4946329072785	コンテナ用IDタグ 青	—	1個入
08-642-03	TC2-3	4946329072792	コンテナ用IDタグ 茶	—	1個入
08-642-04	TC2-4	4946329072808	コンテナ用IDタグ 金	—	1個入
08-642-05	TC2-5	4946329072815	コンテナ用IDタグ 緑	—	1個入
08-642-06	TC2-6	4946329072822	コンテナ用IDタグ 赤	—	1個入
08-642-07	TC2-7	4946329072839	コンテナ用IDタグ 銀	—	1個入
08-642-08	TC2-8	4946329072846	コンテナ用IDタグ オレンジ	—	1個入
08-642-09	TC2-9	4946329072853	コンテナ用IDタグ 紫	—	1個入
08-643-01	TB1-1	4946329072860	バスケット用IDタグ スタンダード 黒	—	1個入
08-643-02	TB1-2	4946329072877	バスケット用IDタグ スタンダード 青	—	1個入
08-643-03	TB1-3	4946329072884	バスケット用IDタグ スタンダード 茶	—	1個入
08-643-04	TB1-4	4946329072891	バスケット用IDタグ スタンダード 金	—	1個入
08-643-05	TB1-5	4946329072907	バスケット用IDタグ スタンダード 緑	—	1個入
08-643-06	TB1-6	4946329072914	バスケット用IDタグ スタンダード 赤	—	1個入
08-643-07	TB1-7	4946329072921	バスケット用IDタグ スタンダード 銀	—	1個入
08-643-08	TB1-8	4946329072938	バスケット用IDタグ スタンダード オレンジ	—	1個入
08-643-09	TB1-9	4946329072945	バスケット用IDタグ スタンダード 紫	—	1個入
08-643-10	TB2-1	4946329072952	バスケット用IDタグ ラージ 黒	—	1個入
08-643-11	TB2-2	4946329072969	バスケット用IDタグ ラージ 青	—	1個入
08-643-12	TB2-3	4946329072976	バスケット用IDタグ ラージ 茶	—	1個入
08-643-13	TB2-4	4946329072983	バスケット用IDタグ ラージ 金	—	1個入
08-643-14	TB2-5	4946329072990	バスケット用IDタグ ラージ 緑	—	1個入
08-643-15	TB2-6	4946329073003	バスケット用IDタグ ラージ 赤	—	1個入
08-643-16	TB2-7	4946329073010	バスケット用IDタグ ラージ 銀	—	1個入
08-643-17	TB2-8	4946329073027	バスケット用IDタグ ラージ オレンジ	—	1個入
08-643-18	TB2-9	4946329073034	バスケット用IDタグ ラージ 紫	—	1個入
08-643-19	TB3-1	4946329073041	バスケット用IDタグ エクストララージ 黒	—	1個入
08-646-01	DP1-1	4946329073225	仕切り板	254×63	1個入
08-646-02	DP1-2	4946329073232	仕切り板	108×63	1個入
08-646-03	DP1-3	4946329073249	仕切り板	254×38	1個入
08-646-04	DP1-4	4946329073256	仕切り板	108×38	1個入
08-646-05	DP1-5	4946329073263	仕切り板	254×19	1個入
08-648-01	PP1-1	4946329073386	ホールディングピン	25mm	1個入
08-648-02	PP1-2	4946329073393	ホールディングピン	38mm	1個入
08-648-03	PP1-2.5	4946329073409	ホールディングピン	50mm	1個入
08-648-04	PP1-3	4946329073416	ホールディングピン	63mm	1個入
08-648-05	PP1-4	4946329073423	ホールディングピン	89mm	1個入

GENESIS NAME OF

各部名称

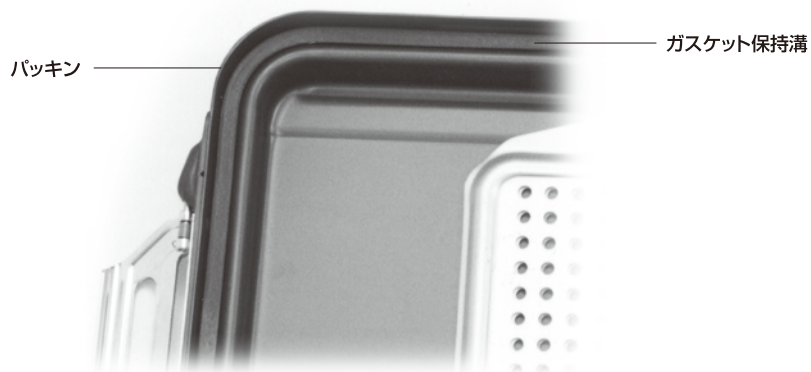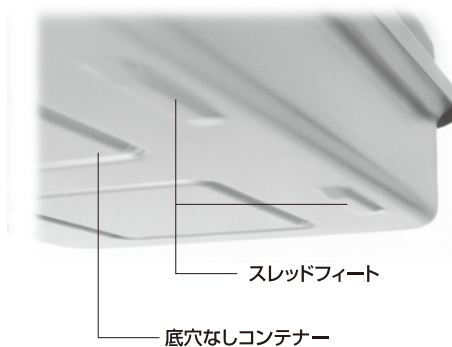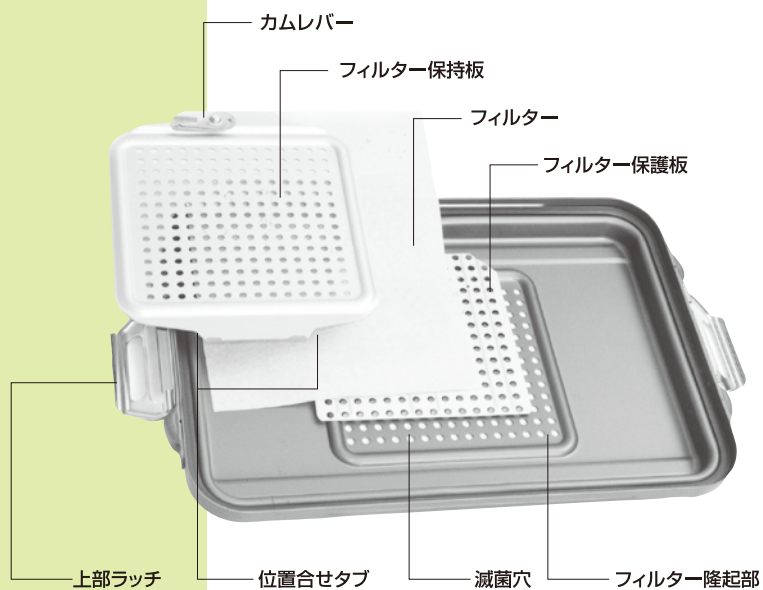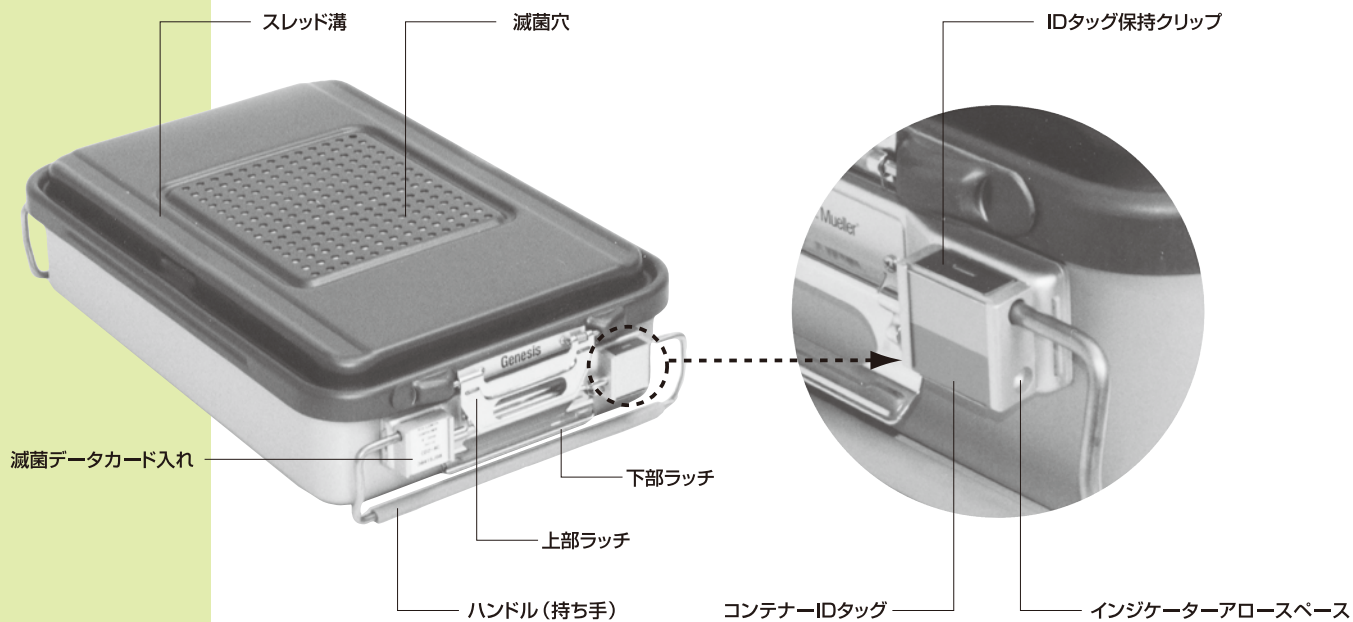



注意

蓋を外す

次のような状態が1つでもあればコンテナの中身は無菌状態とはいえません。

- フィルターが入っていない。
- フィルター保持板が外れている。
- 穴の区域にフィルターが取り付けられていないか、穴を囲む外枠をフィルターがおおっていない。
- フィルターが濡れている。
- フィルターに穴が開いている。
- インジケーターアローがどちらかのロックにはまっていない。
- インジケーターアローが使用前に切れている。
- インジケーターアローに付いているインジケーターの色が変わっていない。
- インジケーターアローに外部インジケーターが付いていない。
- 病院の方針が別に定めていない場合に、バスケットに内部インジケーターかインテグレーターが入っていない。
- バスケットに入っている内部インジケーターの色が変わらなかった。あるいは、インテグレーターを使用した場合に「合格」ではなく「不合格」を示している。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

予防保守点検表

コンテナが本来の性能を発揮するには、下記の事項を日常的に点検しなければなりません。次のような状態が1つでもあればコンテナは正しく機能しません。

蓋

- ラッチが曲がっている。
- ラッチを上下に動かす時にどこかが引っ掛かる感じがする。
- ラッチのブラケットが蓋から離れている。
- パッキンに切れ目や穴があるかぼろぼろになっている。
- パッキンの織り目がくっついていない。
- パッキンが保持溝にきちんとはまっていない。
- パッキンにへこみがありきちんと密閉出来ない。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

コンテナ本体

- ラッチがゆるんだり、コンテナから外れそうになっている。
- ラッチのバネが曲がっているか突き出ている。
- IDタグがない。
- ハンドル(持手)のスリーブがひび割れているか裂けている。
- パッキンと接するコンテナ上端にへこみがある。

保持板

- 形が歪んでいる。
- レバーが曲がっている。
- レバーが保持板をちゃんと固定出来ない。

使用上の注意

洗浄

- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- コンテナには陽極酸化仕上げが施してあるので、中性pH洗剤を使って下さい。
- コンテナ表面を研磨性洗剤や金属ブラシでこすらないで下さい。
- コンテナの構成部品を超音波クリーナーに入れて洗浄しないで下さい。
- 水質や洗浄剤の影響で、コンテナ表面の色落ち もしくはむらが生じる場合があります。

組み立て

- フィルターは1回使用したら捨てて下さい。再使用は絶対にしないで下さい。
- バスケットに詰め込みすぎないで下さい。バスケットとコンテナの高さの差は少なくとも5cm必要です。
- 小袋やカウントシート等の軽い物は固定し、コンテナ内の穴を塞がないようにして下さい。
塞ぐと真空サイクル中にコンテナが潰れることがあります。
- 裏に接着剤が付いているラベルやテープをコンテナの表面に貼らないで下さい。

滅菌

- 重力サイクルの時はコンテナを積み重ねないで下さい。
- 底穴なしコンテナは真空サイクルの時だけ使えます。
- 蓋の穴をなにかに包んだトレー、小袋等で塞がないで下さい。
- コンテナと他の物を一緒に滅菌する時はコンテナを吸気性のものに包んだ物品よりも下に位置させて下さい。
- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- フィルターペーパーは滅菌バリアの役割をはたしており、使用においては取り付けが必要です。フィルター無しの滅菌試験は行っておらず、滅菌性の確認はできません。

その他、詳細については使用説明書をご覧ください。

滅菌する器械についての注意点



- ① 器械の材質等により、滅菌方法に適さない場合がありますので、事前に各機器メーカーに確認してください。
- ② 内腔のあるような複雑な物は機器メーカーの指示に従って滅菌をおこなってください。

事前注意事項

小さなバスケット類、トレー類及びその他の付属品(特に蓋やカバーが付いている付属品)を滅菌する場合、滅菌容器にはそのために専用に製作された滅菌容器だけを使用するようにしてください。

ミズホ株式会社

<https://www.mizuho.co.jp>

【 本 社 】 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

- 販売事業部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売マーケティング部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 販売技術部 TEL 03-3815-3097 FAX 03-3813-5068
- 特販事業部 TEL 03-4334-9111 FAX 03-3813-5068

【 営 業 拠 点 】

- 北海道センター 〒060-0807 札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F
TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター 〒951-8068 新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13
TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F
TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル7F
TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル13F
TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 ZENNO筑紫通ビル5F
TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷3-29-3
TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880

【テクニカルサービス部】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

- 訪問修理受付 TEL 043-481-3367 FAX 043-481-3374
- お預り修理受付 TEL 043-481-3368 FAX 043-481-3375

【ミズホショールーム】 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

○お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 工 場 】

- 五泉工場 〒959-1821 新潟県五泉市赤海3631-14
- 千葉工場 〒285-0808 千葉県佐倉市太田2173-13

製造元



注意

- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

2207-500-AR-008-2207