



GENESIS CONTAINER

CD-B・C Series / CR Series

ジェネシス コンテナ
CD-B・Cシリーズ/CRシリーズ

ジェネシスコンテナ

CD-B.C シリーズ[※]

エチレンオキサイド滅菌 (EOG) 及び蒸気滅菌器での使用に適応する滅菌コンテナです。

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌[※]

※座穴無しコンテナはEOG滅菌には適応していません。



●コンテナは積み重ねが可能です。




●ラッチは蓋を開けるとはねあがり、蓋のハンドル(取っ手)になり、取り外しが容易です。


Genesis
Container
System

Genesis Container


特長

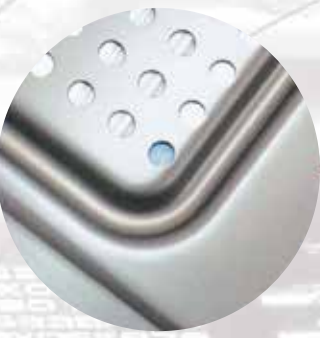


●フィルター保持板のホールは中心点をずらしてあるので、フィルターの穴あきを防止します。




●ガスケットがあるので密閉を保ちます。



●IDタグは入れかえが出来て様々な識別が可能です。



●コンテナは一体加工でリベットを使用していないので破損しにくい構造です。また、ハード陽極処理を施しており、気密性が優れています。



●キャリングハンドルは大きく、上に90度まで上がりシリコンカバーが付いていて、持ち運びに便利です。



●アロー型インジケーターで滅菌後の誤開放を防止します。

CD-B-C Series GE

対応滅菌

真空式蒸気滅菌

EOG滅菌※

コンテナ



●ハーフサイズコンテナ

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 08-630-03 | CD1-4C | 300×314×114 | 248×289×107 | 底穴なし※ |
| 08-630-04 | CD1-5C | 300×314×135 | 248×289×129 | 底穴なし※ |
| 08-630-05 | CD1-6C | 300×314×154 | 248×289×148 | 底穴なし |
| 08-631-03 | CD1-4B | 300×314×114 | 248×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-04 | CD1-5B | 300×314×135 | 248×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-05 | CD1-6B | 300×314×154 | 248×289×148 | 底穴あり |



●ミッドサイズコンテナ

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 08-630-06 | CD2-4C | 488×314×114 | 436×289×107 | 底穴なし※ |
| 08-630-07 | CD2-5C | 488×314×135 | 436×289×129 | 底穴なし※ |
| 08-630-08 | CD2-6C | 488×314×154 | 436×289×148 | 底穴なし※ |
| 08-630-09 | CD2-8C | 488×314×198 | 436×289×191 | 底穴なし |
| 08-631-06 | CD2-4B | 488×314×114 | 436×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-07 | CD2-5B | 488×314×135 | 436×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-08 | CD2-6B | 488×314×154 | 436×289×148 | 底穴あり |
| 08-631-09 | CD2-8B | 488×314×198 | 436×289×191 | 底穴あり |



●フルサイズコンテナ

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 08-630-10 | CD3-4C | 586×314×114 | 533×289×107 | 底穴なし※ |
| 08-630-11 | CD3-5C | 586×314×135 | 533×289×129 | 底穴なし※ |
| 08-630-12 | CD3-6C | 586×314×154 | 533×289×148 | 底穴なし※ |
| 08-630-13 | CD3-7C | 586×314×179 | 533×289×172 | 底穴なし※ |
| 08-631-10 | CD3-4B | 586×314×114 | 547×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-11 | CD3-5B | 586×314×135 | 533×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-12 | CD3-6B | 586×314×154 | 533×289×148 | 底穴あり |
| 08-631-13 | CD3-7B | 586×314×179 | 533×289×172 | 底穴あり |



●レトラクターサイズコンテナ

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 08-630-16 | CD6-6C | 673×432×176 | 610×388×170 | 底穴なし※ |
| 08-631-16 | CD6-6B | 673×432×176 | 610×388×170 | 底穴あり |

NEESIS CONTAINER

Genesis
Container
System



●ミニサイズコンテナ(プロテクタープレートなし)

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| 08-631-01 | CD0-3B | 260×183×80 | 233×129×78 | 底穴あり |



●クォーターサイズコンテナ

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 08-630-02 | CD0-4C | 240×314×95 | 194×295×89 | 底穴なし※ |
| 08-631-02 | CD0-4B | 240×314×95 | 194×295×89 | 底穴あり |



●エンドサイズコンテナ(スモール/S・ラージ/L)

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
| 08-631-14 | CD4-5B | 529×184×133 | 483×165×127 | 底穴あり |

※ 底穴無しコンテナはEOG滅菌には適応しておりません。

CR Series GENESIS CONTAINER

回収用

※CRシリーズは回収用です。滅菌には使用できません。



●リムーバルコンテナ(回収・密封用)

| 商品コード | Genesis No. | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 08-632-01 | CR1-6 | 300×314×154 | 248×289×148 | 回収・密封用 |
| 08-632-02 | CR2-6 | 488×314×154 | 436×289×148 | 回収・密封用 |
| 08-632-03 | CR3-6 | 586×314×154 | 533×289×148 | 回収・密封用 |

GENESIS BA

バスケット

- 1.足が付いているので、保持板を傷つけません。
- 2.バスケットのハンドルには、バーティカルとスタンダードの2タイプあります。
- 3.バスケットのハンドルが垂直に上がる為、邪魔になりません。(バーティカルハンドルのみ)
- 4.バスケットの表面は電解研磨をされており、耐腐食性に優れ器具類にキズが付きにくいです。

(ハンドルタイプ)



バーティカルタイプ

※バーティカルハンドルはスタンダードハンドルに変更出来ます。発注の際にご用命ください。



スタンダードタイプ



(パンチングバスケット)

- 1.ドレープでも包み易い形状になっています。
- 2.器具類が引っ掛かりにくいので、マイクロ・微細器具セットの格納に適しています。

パンチングバスケット



●ハーフサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-636-02 | BP1-2V | 234×267×50 | バーティカルハンドル |
| 08-636-03 | BP1-3V | 234×267×76 | バーティカルハンドル |
| 08-636-04 | BP1-4V | 234×267×100 | バーティカルハンドル |



●ミッドサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-636-05 | BP2-2V | 420×267×50 | バーティカルハンドル |
| 08-636-06 | BP2-3V | 420×267×76 | バーティカルハンドル |
| 08-636-07 | BP2-4V | 420×267×100 | バーティカルハンドル |
| 08-635-09 | BP2-6A | 420×267×152 | スタンダードハンドル |



●フルサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-636-09 | BP3-2V | 520×267×50 | バーティカルハンドル |
| 08-636-10 | BP3-3V | 520×267×76 | バーティカルハンドル |
| 08-636-11 | BP3-4V | 520×267×100 | バーティカルハンドル |
| 08-636-12 | BP3-5V | 520×267×127 | バーティカルハンドル |

SKET LINE UP

Genesis
Container
System



●レトラクターサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-635-18 | BP6-4A | 584×380×110 | スタンダードハンドル |



●ミニサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-635-01 | BP0-1A | 229×127×44 | スタンダードハンドル |



●クォーターサイズバスケット

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-636-01 | BP0-2V | 178×279×50 | パーティカルハンドル |



●エンドサイズバスケット(スモール/S・ラージ/L)

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|---------------|
| 08-636-13 | BP4-2V | 470×152×50 | (S)パーティカルハンドル |
| 08-636-14 | BP4-4V | 470×152×100 | (S)パーティカルハンドル |
| 08-636-15 | BP5-2V | 660×203×50 | (L)パーティカルハンドル |
| 08-636-16 | BP5-4V | 660×203×100 | (L)パーティカルハンドル |



スタッキングバスケット(積み重ね用)



●ハーフサイズ

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-637-01 | BP1-1AS | 229×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-09 | BP1-2VS | 229×254×50 | パーティカルハンドル |

●ミッドサイズ

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-637-03 | BP2-1AS | 413×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-10 | BP2-2VS | 413×254×50 | パーティカルハンドル |

●フルサイズ

| 商品コード | Genesis No. | サイズL×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|--------------|------------|
| 08-637-05 | BP3-1AS | 527×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-11 | BP3-2VS | 527×254×50 | パーティカルハンドル |

GENESIS

CD-B・C/CR Series アクセサリー


※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用アクセサリー品をご使用ください。



●蒸気滅菌専用インジケータアロー

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|-------|
| 08-639-03 | AS2-2 | 500本 |
| 08-639-04 | AS2-3 | 1000本 |

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

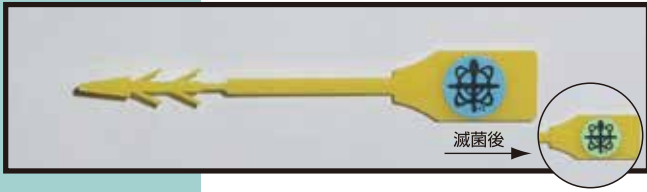

●EOG滅菌専用インジケータアロー

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|-------|
| 08-639-02 | AG2-2 | 500本入 |

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)



●フィルターペーパー (蒸気滅菌・EOG滅菌・過酸化水素プラズマ滅菌専用)

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| 08-640-17 | DST-1 | ミニサイズ用 500枚入 |
| 08-640-18 | DST-2 | クォーターサイズ用 500枚入 |
| 08-640-19 | DST-3 | ハーフ/ミッド/フル/レトラクターサイズ用1000枚入 |

※CD-B・C/CD-ST シリーズ共通フィルターです。



●データカード (蒸気滅菌・EOG滅菌専用)

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|-------|
| 08-641-01 | MD1-1 | 500枚入 |

注:過酸化水素プラズマ滅菌には、使用できません。



●フィルター保護板 (蒸気滅菌専用)

| 商品コード | Genesis No. | 規格 |
|-----------|-------------|-------------|
| 08-661-11 | RP30-2 | ハーフ/ミッド/フル用 |
| 08-661-18 | R1190 | クォーター用 |
| 08-661-21 | R1384 | エンドサイズスモール用 |

注:過酸化水素プラズマ滅菌・EOG滅菌には、使用できません。

フルサイズに使用するには2枚必要になります。


●CD-B・Cシリーズのコンテナ本体及びアクセサリー品は、過酸化水素プラズマ滅菌器STERRAD®には使用できません。
●必ず滅菌方法に適合した専用インジケータアローを使用してください。

過酸化水素プラズマ滅菌対応コンテナ専用

CD-ST Series アクセサリー

※CD-ST Seriesは専用アクセサリ品のみ取り扱いとなります。


※注意 本コンテナを使用する際は、必ず以下の専用アクセサリ品をご使用ください。

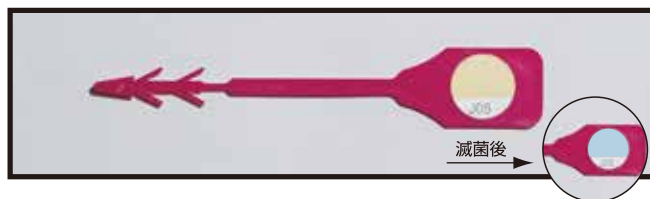

●過酸化水素プラズマ滅菌専用インジケータアロー

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|--------|
| 08-639-11 | AH2-1 | 150 本入 |

注:本製品の箱表面に有効期限が記載されています。
有効期限の過ぎた製品は、使用しないでください。
注:湿気が無く涼しい場所(15~30℃)で、アルカリや酸性の化学物質から遠ざけて保管してください。

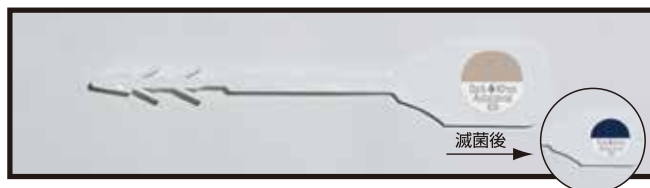

●蒸気滅菌専用インジケータアロー

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|--------|
| 08-639-03 | AS2-2 | 500 本 |
| 08-639-04 | AS2-3 | 1000 本 |


注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)



●EOG滅菌専用インジケータアロー

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|--------|
| 08-639-02 | AG2-2 | 500 本入 |

注:湿気が無く涼しい場所に保管してください。(湿度50%以下、室温22℃)

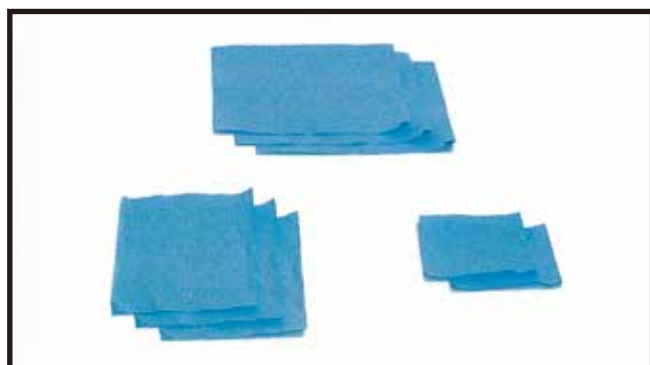

●フィルターペーパー (蒸気滅菌・EOG滅菌・過酸化水素プラズマ滅菌専用)

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|-----------------------------|
| 08-640-17 | DST-1 | ミニサイズ用 500 枚入 |
| 08-640-18 | DST-2 | クォーターサイズ用 500 枚入 |
| 08-640-19 | DST-3 | ハーフ/ミッド/フル/レトラクターサイズ用1000枚入 |

※CD-B・C/CD-ST シリーズ共通フィルターです。



●データカード

| 商品コード | Genesis No. | 数量 |
|-----------|-------------|--------|
| 08-639-41 | MH1-1 | 500 枚入 |

注:データカードMD1-1は、使用しないでください。

GENESIS

アクセサリ




●コンテナ用IDタグ

| 商品コード | Genesis No. | 規格 |
|-----------|-------------|------|
| 08-642-01 | TC2-1 | 黒 |
| 08-642-02 | TC2-2 | 青 |
| 08-642-03 | TC2-3 | 茶 |
| 08-642-04 | TC2-4 | 金 |
| 08-642-05 | TC2-5 | 緑 |
| 08-642-06 | TC2-6 | 赤 |
| 08-642-07 | TC2-7 | 銀 |
| 08-642-08 | TC2-8 | オレンジ |
| 08-642-09 | TC2-9 | 紫 |



●バスケット用IDタグ

| 商品コード | Genesis No. | 規格 |
|-----------|-------------|-------------|
| 08-643-01 | TB1-1 | スタンダード 黒 |
| 08-643-02 | TB1-2 | スタンダード 青 |
| 08-643-03 | TB1-3 | スタンダード 茶 |
| 08-643-04 | TB1-4 | スタンダード 金 |
| 08-643-05 | TB1-5 | スタンダード 緑 |
| 08-643-06 | TB1-6 | スタンダード 赤 |
| 08-643-07 | TB1-7 | スタンダード 銀 |
| 08-643-08 | TB1-8 | スタンダード オレンジ |
| 08-643-09 | TB1-9 | スタンダード 紫 |
| 08-643-10 | TB2-1 | ラージ 黒 |
| 08-643-11 | TB2-2 | ラージ 青 |
| 08-643-12 | TB2-3 | ラージ 茶 |
| 08-643-13 | TB2-4 | ラージ 金 |
| 08-643-14 | TB2-5 | ラージ 緑 |
| 08-643-15 | TB2-6 | ラージ 赤 |
| 08-643-16 | TB2-7 | ラージ 銀 |
| 08-643-17 | TB2-8 | ラージ オレンジ |
| 08-643-18 | TB2-9 | ラージ 紫 |
| 08-643-19 | TB3-1 | エクストララージ 黒 |

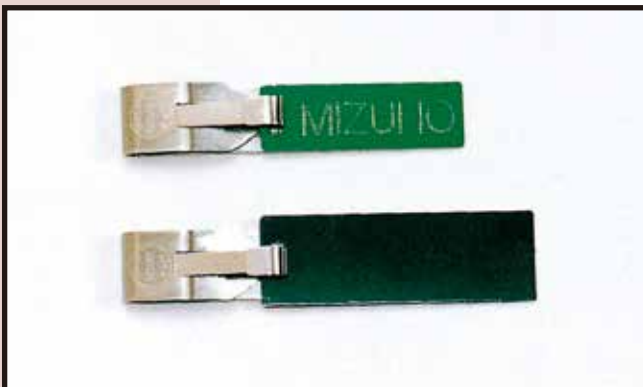



●仕切り板

| 商品コード | Genesis No. | サイズ(mm) | 数量 |
|-----------|-------------|---------|-----|
| 08-646-01 | DP1-1 | 254×63 | 1個入 |
| 08-646-02 | DP1-2 | 108×63 | 1個入 |
| 08-646-03 | DP1-3 | 254×38 | 1個入 |
| 08-646-04 | DP1-4 | 108×38 | 1個入 |
| 08-646-05 | DP1-5 | 254×19 | 1個入 |



●ホールディングピン

| 商品コード | Genesis No. | サイズ | 数量 |
|-----------|-------------|------|-----|
| 08-648-01 | PP1-1 | 25mm | 1個入 |
| 08-648-02 | PP1-2 | 38mm | 1個入 |
| 08-648-03 | PP1-2.5 | 50mm | 1個入 |
| 08-648-04 | PP1-3 | 63mm | 1個入 |
| 08-648-05 | PP1-4 | 89mm | 1個入 |

GENESIS CONTAIN

ジェネシスコンテナシステム明細

■コンテナ

| 商品コード | Genesis No. | JAN コード | 商品名 | 底穴なし | 底穴あり | 外寸 L×W×H(mm) | 内寸 L×W×H(mm) | 規格 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|----------|------|--------------|--------------|--------|
| 08-630-03 | CD1-4C | 4946329071689 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×114 | 248×289×107 | 底穴なし |
| 08-630-04 | CD1-5C | 4946329071696 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×135 | 248×289×129 | 底穴なし |
| 08-630-05 | CD1-6C | 4946329071702 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×154 | 248×289×148 | 底穴なし |
| 08-631-03 | CD1-4B | 4946329071849 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×114 | 248×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-04 | CD1-5B | 4946329071856 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×135 | 248×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-05 | CD1-6B | 4946329071863 | ハーフサイズコンテナ | | | 300×314×154 | 248×289×148 | 底穴あり |
| 08-630-06 | CD2-4C | 4946329071719 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×114 | 436×289×107 | 底穴なし |
| 08-630-07 | CD2-5C | 4946329071726 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×135 | 436×289×129 | 底穴なし |
| 08-630-08 | CD2-6C | 4946329071733 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×154 | 436×289×148 | 底穴なし |
| 08-630-09 | CD2-8C | 4946329071740 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×198 | 436×289×191 | 底穴なし |
| 08-631-06 | CD2-4B | 4946329071870 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×114 | 436×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-07 | CD2-5B | 4946329071887 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×135 | 436×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-08 | CD2-6B | 4946329071894 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×154 | 436×289×148 | 底穴あり |
| 08-631-09 | CD2-8B | 4946329071900 | ミッドサイズコンテナ | | | 488×314×198 | 436×289×191 | 底穴あり |
| 08-630-10 | CD3-4C | 4946329071757 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×114 | 533×289×107 | 底穴なし |
| 08-630-11 | CD3-5C | 4946329071764 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×135 | 533×289×129 | 底穴なし |
| 08-630-12 | CD3-6C | 4946329071771 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×154 | 533×289×148 | 底穴なし |
| 08-630-13 | CD3-7C | 4946329071788 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×179 | 533×289×172 | 底穴なし |
| 08-631-10 | CD3-4B | 4946329071917 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×114 | 547×289×107 | 底穴あり |
| 08-631-11 | CD3-5B | 4946329071924 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×135 | 533×289×129 | 底穴あり |
| 08-631-12 | CD3-6B | 4946329071931 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×154 | 533×289×148 | 底穴あり |
| 08-631-13 | CD3-7B | 4946329071948 | フルサイズコンテナ | | | 586×314×179 | 533×289×172 | 底穴あり |
| 08-630-16 | CD6-6C | 4946329071818 | レトラクターサイズコンテナ | | | 673×432×176 | 610×388×170 | 底穴なし |
| 08-631-16 | CD6-6B | 4946329071979 | レトラクターサイズコンテナ | | | 673×432×176 | 610×388×170 | 底穴あり |
| 08-631-01 | CD0-3B | 4946329071825 | ミニサイズコンテナ | | | 260×183×80 | 233×129×78 | 底穴あり |
| 08-630-02 | CD0-4C | 4946329071672 | クォーターサイズコンテナ | | | 240×314×95 | 194×295×89 | 底穴なし |
| 08-631-02 | CD0-4B | 4946329071832 | クォーターサイズコンテナ | | | 240×314×95 | 194×295×89 | 底穴あり |
| 08-631-14 | CD4-5B | 4946329071955 | エンドサイズコンテナ | 底穴あり | スモール | 529×184×133 | 483×165×127 | 底穴あり |
| 08-632-01 | CR1-6 | 4946329071986 | リムーバルコンテナ | (回収・密封用) | | 300×314×154 | 248×289×148 | 回収・密封用 |
| 08-632-02 | CR2-6 | 4946329071993 | リムーバルコンテナ | (回収・密封用) | | 488×314×154 | 436×289×148 | 回収・密封用 |
| 08-632-03 | CR3-6 | 4946329072006 | リムーバルコンテナ | (回収・密封用) | | 586×314×154 | 533×289×148 | 回収・密封用 |

■バスケット





| 商品コード | Genesis No. | JAN コード | 商品名 | サイズ L×W×H(mm) | ハンドル形状 |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 08-636-02 | BP1-2V | 4946329072334 | パンチングバスケット ハーフサイズ | 234×267×50 | パーティカルハンドル |
| 08-636-03 | BP1-3V | 4946329072341 | パンチングバスケット ハーフサイズ | 234×267×76 | パーティカルハンドル |
| 08-636-04 | BP1-4V | 4946329072358 | パンチングバスケット ハーフサイズ | 234×267×100 | パーティカルハンドル |
| 08-636-05 | BP2-2V | 4946329072365 | パンチングバスケット ミッドサイズ | 420×267×50 | パーティカルハンドル |
| 08-636-06 | BP2-3V | 4946329072372 | パンチングバスケット ミッドサイズ | 420×267×76 | パーティカルハンドル |
| 08-636-07 | BP2-4V | 4946329072389 | パンチングバスケット ミッドサイズ | 420×267×100 | パーティカルハンドル |
| 08-635-09 | BP2-6A | 4946329072228 | パンチングバスケット ミッドサイズ | 420×267×152 | スタンダードハンドル |
| 08-636-09 | BP3-2V | 4946329072402 | パンチングバスケット フルサイズ | 520×267×50 | パーティカルハンドル |
| 08-636-10 | BP3-3V | 4946329072419 | パンチングバスケット フルサイズ | 520×267×76 | パーティカルハンドル |
| 08-636-11 | BP3-4V | 4946329072426 | パンチングバスケット フルサイズ | 520×267×100 | パーティカルハンドル |
| 08-636-12 | BP3-5V | 4946329072433 | パンチングバスケット フルサイズ | 520×267×127 | パーティカルハンドル |
| 08-635-18 | BP6-4A | 4946329072310 | パンチングバスケット レトラクターサイズ | 584×380×110 | スタンダードハンドル |
| 08-635-01 | BP0-1A | 4946329072143 | パンチングバスケット ミニサイズ | 229×127×44 | スタンダードハンドル |
| 08-636-01 | BP0-2V | 4946329072327 | パンチングバスケット クォーターサイズ | 178×279×50 | パーティカルハンドル |
| 08-636-13 | BP4-2V | 4946329072440 | パンチングバスケット エンドサイズスモール | 470×152×50 | (S)パーティカルハンドル |
| 08-636-14 | BP4-4V | 4946329072457 | パンチングバスケット エンドサイズスモール | 470×152×100 | (S)パーティカルハンドル |
| 08-636-15 | BP5-2V | 4946329072464 | パンチングバスケット エンドサイズラージ | 660×203×50 | (L)パーティカルハンドル |
| 08-636-16 | BP5-4V | 4946329072471 | パンチングバスケット エンドサイズラージ | 660×203×100 | (L)パーティカルハンドル |
| 08-637-01 | BP1-1AS | 4946329072495 | スタッキングバスケット ハーフサイズ | 229×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-09 | BP1-2VS | 4946329072570 | スタッキングバスケット ハーフサイズ | 229×254×50 | パーティカルハンドル |
| 08-637-03 | BP2-1AS | 4946329072518 | スタッキングバスケット ミッドサイズ | 413×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-10 | BP2-2VS | 4946329072587 | スタッキングバスケット ミッドサイズ | 413×254×50 | パーティカルハンドル |
| 08-637-05 | BP3-1AS | 4946329072532 | スタッキングバスケット フルサイズ | 527×254×25 | スタンダードハンドル |
| 08-637-11 | BP3-2VS | 4946329072594 | スタッキングバスケット フルサイズ | 527×254×50 | パーティカルハンドル |

■アクセサリ

| 商品コード | Genesis No. | JANコード | 商品名 | サイズ(mm) | 規格または数量 |
|-----------|-------------|---------------|------------------------------|---------|-------------|
| 08-639-03 | AS2-2 | 4946329072686 | インジケータアロー 蒸気用(白) | — | 500本 |
| 08-639-04 | AS2-3 | 4946329072693 | インジケータアロー 蒸気用(白) | — | 1000本 |
| 08-639-02 | AG2-2 | 4946329072679 | インジケータアロー ガス用(黄) | — | 500本入 |
| 08-639-11 | AH2-1 | 4946329124484 | インジケータアロー プラズマ用(ピンク) | — | 150本入 |
| 08-640-17 | DST-1 | 4946329215830 | フィルターペーパー ミニサイズ用 | — | 500枚入 |
| 08-640-18 | DST-2 | 4946329215847 | フィルターペーパー クォーターサイズ用 | — | 500枚入 |
| 08-640-19 | DST-3 | 4946329215854 | フィルターペーパー ハーフ/ミッド/フル/レトラクター用 | — | 1000枚入 |
| 08-641-01 | MD1-1 | 4946329072761 | データカード(蒸気滅菌・EOG滅菌専用) | — | 500枚入 |
| 08-639-41 | MH1-1 | 4946329124491 | データカード | — | 500枚入 |
| 08-661-11 | RP30-2 | 4946329074130 | フィルター保護板 ハーフ/ミッド/フル用 | — | ハーフ/ミッド/フル用 |
| 08-661-18 | R1190 | 4946329074208 | フィルター保護板 クォーター用 | — | クォーター用 |
| 08-661-21 | R1384 | 4946329074239 | フィルター保護板 エンドサイズスモール用 | — | エンドサイズスモール用 |
| 08-642-01 | TC2-1 | 4946329072778 | コンテナ用IDタグ 黒 | — | 1個入 |
| 08-642-02 | TC2-2 | 4946329072785 | コンテナ用IDタグ 青 | — | 1個入 |
| 08-642-03 | TC2-3 | 4946329072792 | コンテナ用IDタグ 茶 | — | 1個入 |
| 08-642-04 | TC2-4 | 4946329072808 | コンテナ用IDタグ 金 | — | 1個入 |
| 08-642-05 | TC2-5 | 4946329072815 | コンテナ用IDタグ 緑 | — | 1個入 |
| 08-642-06 | TC2-6 | 4946329072822 | コンテナ用IDタグ 赤 | — | 1個入 |
| 08-642-07 | TC2-7 | 4946329072839 | コンテナ用IDタグ 銀 | — | 1個入 |
| 08-642-08 | TC2-8 | 4946329072846 | コンテナ用IDタグ オレンジ | — | 1個入 |
| 08-642-09 | TC2-9 | 4946329072853 | コンテナ用IDタグ 紫 | — | 1個入 |
| 08-643-01 | TB1-1 | 4946329072860 | バスケット用IDタグ スタンダード 黒 | — | 1個入 |
| 08-643-02 | TB1-2 | 4946329072877 | バスケット用IDタグ スタンダード 青 | — | 1個入 |
| 08-643-03 | TB1-3 | 4946329072884 | バスケット用IDタグ スタンダード 茶 | — | 1個入 |
| 08-643-04 | TB1-4 | 4946329072891 | バスケット用IDタグ スタンダード 金 | — | 1個入 |
| 08-643-05 | TB1-5 | 4946329072907 | バスケット用IDタグ スタンダード 緑 | — | 1個入 |
| 08-643-06 | TB1-6 | 4946329072914 | バスケット用IDタグ スタンダード 赤 | — | 1個入 |
| 08-643-07 | TB1-7 | 4946329072921 | バスケット用IDタグ スタンダード 銀 | — | 1個入 |
| 08-643-08 | TB1-8 | 4946329072938 | バスケット用IDタグ スタンダード オレンジ | — | 1個入 |
| 08-643-09 | TB1-9 | 4946329072945 | バスケット用IDタグ スタンダード 紫 | — | 1個入 |
| 08-643-10 | TB2-1 | 4946329072952 | バスケット用IDタグ ラージ 黒 | — | 1個入 |
| 08-643-11 | TB2-2 | 4946329072969 | バスケット用IDタグ ラージ 青 | — | 1個入 |
| 08-643-12 | TB2-3 | 4946329072976 | バスケット用IDタグ ラージ 茶 | — | 1個入 |
| 08-643-13 | TB2-4 | 4946329072983 | バスケット用IDタグ ラージ 金 | — | 1個入 |
| 08-643-14 | TB2-5 | 4946329072990 | バスケット用IDタグ ラージ 緑 | — | 1個入 |
| 08-643-15 | TB2-6 | 4946329073003 | バスケット用IDタグ ラージ 赤 | — | 1個入 |
| 08-643-16 | TB2-7 | 4946329073010 | バスケット用IDタグ ラージ 銀 | — | 1個入 |
| 08-643-17 | TB2-8 | 4946329073027 | バスケット用IDタグ ラージ オレンジ | — | 1個入 |
| 08-643-18 | TB2-9 | 4946329073034 | バスケット用IDタグ ラージ 紫 | — | 1個入 |
| 08-643-19 | TB3-1 | 4946329073041 | バスケット用IDタグ エクストララージ 黒 | — | 1個入 |
| 08-646-01 | DP1-1 | 4946329073225 | 仕切り板 | 254×63 | 1個入 |
| 08-646-02 | DP1-2 | 4946329073232 | 仕切り板 | 108×63 | 1個入 |
| 08-646-03 | DP1-3 | 4946329073249 | 仕切り板 | 254×38 | 1個入 |
| 08-646-04 | DP1-4 | 4946329073256 | 仕切り板 | 108×38 | 1個入 |
| 08-646-05 | DP1-5 | 4946329073263 | 仕切り板 | 254×19 | 1個入 |
| 08-648-01 | PP1-1 | 4946329073386 | ホールディングピン | 25mm | 1個入 |
| 08-648-02 | PP1-2 | 4946329073393 | ホールディングピン | 38mm | 1個入 |
| 08-648-03 | PP1-2.5 | 4946329073409 | ホールディングピン | 50mm | 1個入 |
| 08-648-04 | PP1-3 | 4946329073416 | ホールディングピン | 63mm | 1個入 |
| 08-648-05 | PP1-4 | 4946329073423 | ホールディングピン | 89mm | 1個入 |

GENESIS NAME OF

各部名称

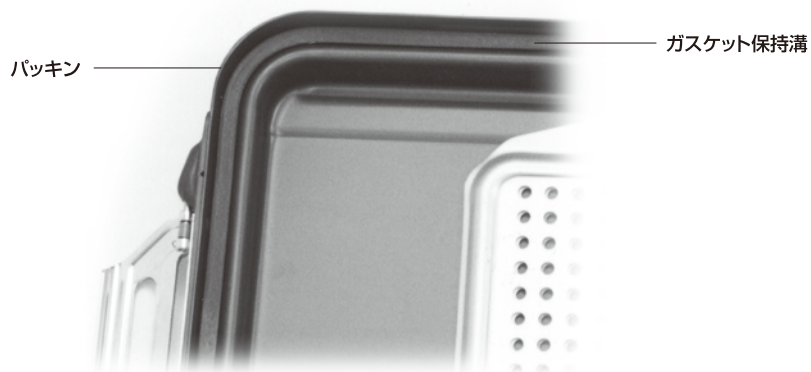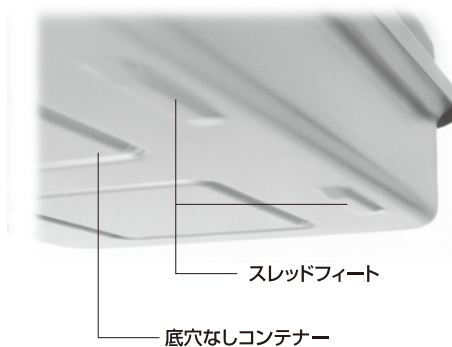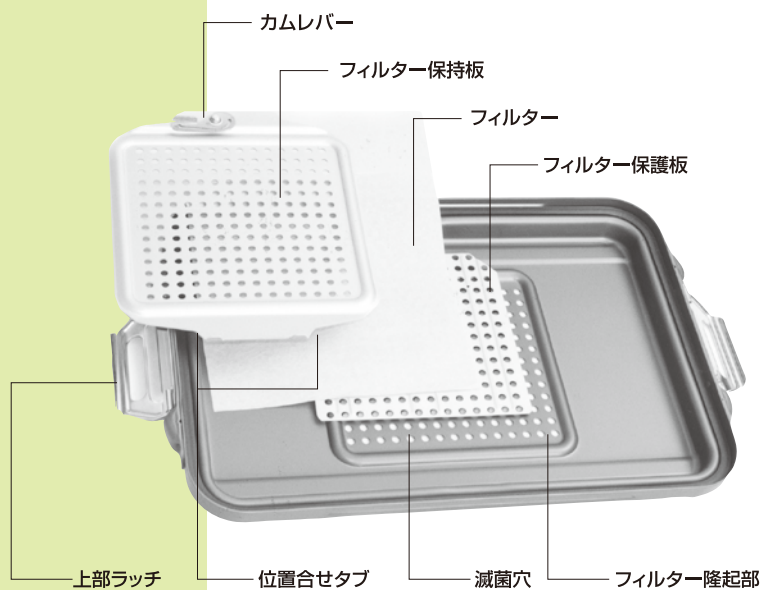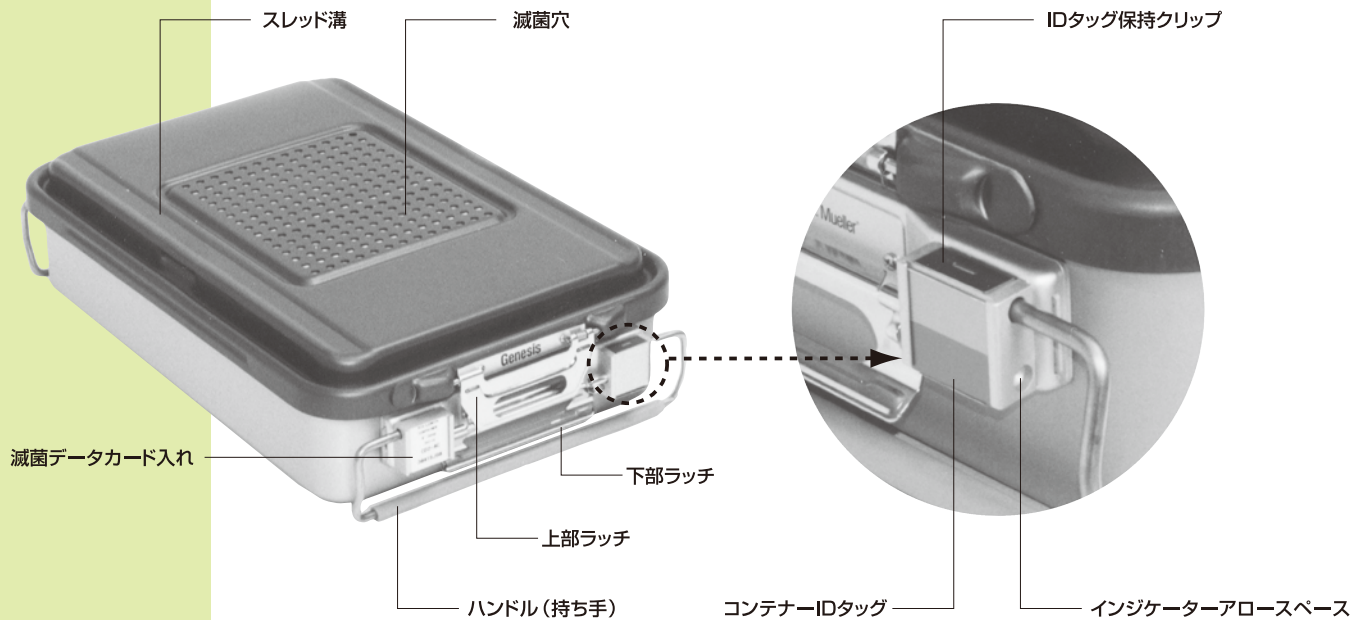



注意

蓋を外す

次のような状態が1つでもあればコンテナの中身は無菌状態とはいえません。

- フィルターが入っていない。
- フィルター保持板が外れている。
- 穴の区域にフィルターが取り付けられていないか、穴を囲む外枠をフィルターがおおっていない。
- フィルターが濡れている。
- フィルターに穴が開いている。
- インジケーターアローがどちらかのロックにはまっていない。
- インジケーターアローが使用前に切れている。
- インジケーターアローに付いているインジケーターの色が変わっていない。
- インジケーターアローに外部インジケーターが付いていない。
- 病院の方針が別に定めていない場合に、バスケットに内部インジケーターかインテグレーターが入っていない。
- バスケットに入っている内部インジケーターの色が変わらなかった。あるいは、インテグレーターを使用した場合に「合格」ではなく「不合格」を示している。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

予防保守点検表

コンテナが本来の性能を発揮するには、下記の事項を日常的に点検しなければなりません。次のような状態が1つでもあればコンテナは正しく機能しません。

蓋

- ラッチが曲がっている。
- ラッチを上下に動かす時にどこかが引っ掛かる感じがする。
- ラッチのブラケットが蓋から離れている。
- パッキンに切れ目や穴があるかぼろぼろになっている。
- パッキンの織り目がくっついていない。
- パッキンが保持溝にきちんとはまっていない。
- パッキンにへこみがありきちんと密閉出来ない。
- コンテナに水が入っている。
- パッキンが損傷しているか保持溝にきちんと入っていない。

コンテナ本体

- ラッチがゆるんだり、コンテナから外れそうになっている。
- ラッチのバネが曲がっているか突き出ている。
- IDタグがない。
- ハンドル(持手)のスリーブがひび割れているか裂けている。
- パッキンと接するコンテナ上端にへこみがある。

保持板

- 形が歪んでいる。
- レバーが曲がっている。
- レバーが保持板をちゃんと固定出来ない。

使用上の注意

洗浄

- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- コンテナには陽極酸化仕上げが施してあるので、中性洗剤を使って下さい。
- コンテナ表面を研磨性洗剤や金属ブラシでこすらないで下さい。
- コンテナの構成部品を超音波クリーナーに入れて洗浄しないで下さい。
- 水質や洗浄剤の影響で、コンテナ表面の色落ち もしくはむらが生じる場合があります。

組み立て

- フィルターは1回使用したら捨てて下さい。再使用は絶対にしないで下さい。
- バスケットに詰め込みすぎないで下さい。バスケットとコンテナの高さの差は少なくとも5cm必要です。
- 小袋やカウントシート等の軽い物は固定し、コンテナ内の穴を塞がないようにして下さい。
塞ぐと真空サイクル中にコンテナが潰れることがあります。
- 裏に接着剤が付いているラベルやテープをコンテナの表面に貼らないで下さい。

滅菌

- 重力サイクルの時はコンテナを積み重ねないで下さい。
- 底穴なしコンテナは真空サイクルの時だけ使えます。
- 蓋の穴をなにかに包んだトレー、小袋等で塞がないで下さい。
- コンテナと他の物を一緒に滅菌する時はコンテナを吸気性のものに包んだ物品よりも下に位置させて下さい。
- ご購入後初めて使用を行う場合には、必ず洗浄を行って下さい。
- フィルターペーパーは滅菌バリアの役割をはたしており、使用においては取り付けが必要です。フィルター無しの滅菌試験は行っておらず、滅菌性の確認はできません。

その他、詳細については取扱説明書をご覧ください。

滅菌する器械についての注意点



- ① 機器の材質等により、滅菌方法に適さない場合がありますので、事前に各機器メーカーに確認してください。
- ② 内腔のあるような複雑な物は機器メーカーの指示に従って滅菌をおこなってください。

事前注意事項

小さなバスケット類、トレー類及びその他の付属品(特に蓋やカバーが付いている付属品)を滅菌する場合、滅菌容器にはそのために専用で製作された滅菌容器だけを使用するようにしてください。

ミスホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミスホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前取扱説明書をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミスホの最新情報はこちら



2501-PDF-AR-009-2501