

hana

hana ORTHOPEDIC SURGERY TABLE
FOR EXISTING AND EVOLVING ORTHOPEDIC PROCEDURES



A SUPERIOR TABLE FOR ORTHOPEDIC PROCEDURE

ANTERIOR APPROACH TO TOTAL HIP ARTHROPLASTY (THA)

IM NAILING FEMUR

HIP PINNING

HIP ARTHROSCOPY

TOTAL HIP RESURFACING




THAでの前方アプローチを最適化

hanaでは、骨盤や大腿骨から筋肉を剥離することなく、一ヶ所の切開で前方アプローチによる股関節の置換が可能です。このテーブルは、過伸展、外転、内転はもちろんのこと、大腿骨コンポーネント置換のための股関節外旋という従来の手術台では不可能だったポジショニングが可能です。側方および後方の軟組織はそのままなので、術後ただちに股関節の安定が期待できます。



MIS膝関節術が可能

・Total Knee Flexion and Support System (全膝関節屈曲及びサポート・システム) は膝関節全置換を含む体位セッティングが可能です。

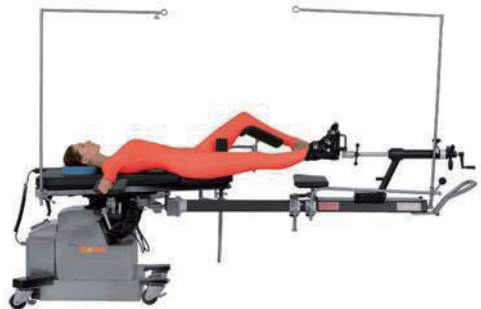

抜群の操作性

- ・医師が患者の下肢を屈曲させる際に役立ちます。
- ・スパーには球状三次元ポジショニング・システム (Spherical Spatial Positioning System: SSPS) が組み込まれています。
- ・骨折用キットにより、下肢骨折術に対応します。



充実した撮像機能

放射線透過性に優れたカーボンファイバー構造で、干渉の少ない撮像が可能。Cアームのアクセスも容易です。

TEMPUR-PEDIC 医療用パッド・テクノロジー

患者の体型に合わせて術中の圧力を均一化。患者の快適性と安全性を高めています。



高い安定性

- ・優れた剛性
- ・最大許容体重: 205kg

優れたサービス性

- ・LED連続モニタリング・システム
- ・交換可能なコントロール・モジュール

hana

IM NAILING TIBIA

TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

SUPINE AND LATERAL POSITIONING



大腿部リフト・コントロール

- 人工股関節全置換術 (THA) での前方アプローチに対応
- 特許取得済み大腿部フック・システム採用
- 外科医によるコントロールが可能な電動大腿部リフト



本体コントロールパネル



大腿骨リフト用フットペダル

- 大腿骨リフト・サポートの上昇／下降を電動でコントロール



電動ハンドペンダント



牽引ブーツ

- 患者の位置、操作、牽引を高精度にコントロール



交換可能なコントロール・モジュール

- 簡単な交換作業
- AC電源またはバッテリー駆動



ORDERING INFORMATION

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
02-149-10	4946329150995	Hanaテーブル (6875J)	I

製品仕様

全長	1230mm (※3150mm) ※Hanaラジオールセントトラクションアーム装着時
全幅	550mm (ポスト近傍250mm)
質量	400kg
定格電源電圧	AC100V
定格電源周波数	50-60Hz
電源入力	400VA
バッテリー電源電圧	DC24V
患者の最大許容体重	205kg

操作範囲

電 動	昇降範囲	最高位:1270mm	最低位:760mm
	縦転角度	頭下がり:12°	頭上がり:12°
	横転角度	右下がり:12°	左下がり:12°
	自動水平復帰	縦転／横転	
手 動	トラクションブーツ展開角度	内転:20°	外転:45°
	トラクションブーツ屈折角度	上がり:28°	下がり:35°
	トラクションブーツ回転角度	360°	
	トラクションアーム回転角度	360°	

製品の特徴

- カーボンファイバー製テーブルトップ
- 本体コントロールパネル
- 交換可能なコントロール・モジュール
- 手動フロアロック
- コントロール用フットペダル
- アクセサリ・サイドレール
- ステンレススチール製ベース
- 軽量スパー
- AC電源またはバッテリー駆動
- 球状三次元ポジショニング・システム
(Spherical Spatial Positioning System:SSPS)

ポジショニング機能

Supine / Lateral

一般医療機器	類別:機械器具(01)手術台及び治療台 一般的名称:整形外科用手術台 販売名:HANAテーブル JMDNコード:35394000	届出番号:13B1X00306N10003
--------	---	-----------------------

標準付属品

02-144-22	安全ベルト 90インチ (5840-44)
02-149-11	Hanaテーブルベース (6875-7)
02-149-20	レッグボードLARGE (5855-838)
02-149-21	レッグブラケット (6300-92)
02-149-22	トラクションブーツSMALL 1組 (6850-485)
02-149-23	トラクションブーツLARGE 1組 (6850-486)
02-149-25	トラクションブーツライナーセットSMALL (FE00384)
02-149-26	トラクションブーツライナーセットLARGE (FE00386)
02-149-28	仰臥位用股間支柱 (6850-413)
02-149-32	Hanaフェモラルリフト緊急用昇降ハンドル (6875-602)
02-149-33	Hanaフェモラルリフトマウント着脱式 (6875-2730)
02-149-34	Hana腰部テーブルパッド (6875-7129)
02-149-35	Hanaテーブルパッド (6875-7120)
02-149-70	フェモラルフックロングRIGHT (6850-140)
02-149-71	フェモラルフックロングLEFT (6850-144)
02-149-72	フェモラルフックRIGHT (6850-919)
02-149-73	フェモラルフックLEFT (6850-918)
02-149-75	フェモラルフックサポート 1組 (6850-110)
02-149-76	Hanaフェモラルリフトエクステンション 1組 (6875-264)
02-149-77	HanaフェモラルリフトマウントRIGHT (6875-600)
02-149-78	HanaフェモラルリフトマウントLEFT (6875-601)
02-149-79	Hanaフェモラルリフトフットペダル (6875-5003)
02-149-80	Hanaトラクションブーツ延長器1組 (6875-399)
02-149-81	HanaTKAアンクルサポートシステム (6875-230)
02-149-82	Hanaレッグサポートアダプター (6875-201)
02-149-83	HanaラジオールセントトラクションアームRIGHT (6875-350)
02-149-84	HanaラジオールセントトラクションアームLEFT (6875-360)
02-149-85	Hanaパッド付上肢台 (6875-292)
02-149-86	Hana側臥位用股間支柱 (6875-250)
02-149-87	Hanaテーブルカバー (6875-20)
02-149-88	Hana操作BOX (6807-4)

アクセサリ(オプション)

02-143-08	トラクションアームクランプ (5855-61)
02-149-24	トラクションブーツX-LARGE 1組 (6850-487)
02-149-29	レッグボードLARGE (6850-170)
02-149-30	Hana / PROFX患者保護キット6個入 (6855)
02-149-31	Hana外傷セット (6875-2761)
02-149-42	脛骨用直行型トラクションロッド (5855-411)
02-149-43	脛骨用トラクションブーツアダプター (6850-25)
02-149-44	トラクションユニット (5855-345)
02-149-45	トラクションフットプレート (5855-440)
02-149-46	股関節鏡用股間支柱 (3369)
02-149-89	Hana付属品カート (6875-500)

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよく読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

