



# Paramon<sup>®</sup>

MIZUHO OR INTEGRATION SYSTEM

# Paramon®

MIZUHO OR INTEGRATION SYSTEM



## 手術室の映像を直感的にコントロール

Paramon®は、「術野カメラ」「内視鏡映像」「電子カルテ」「PACS」など、手術室内のさまざまな映像ソースを集約し一括管理。各種ディスプレイへの映像出力、映像の録画操作、遠隔地へのライブ配信を**タッチパネルで直感的に操作する映像管理システム**です。

円滑な情報共有により手術のサポートに貢献するだけでなく、安全管理から教育に至るまで、幅広く映像ソースを活用できます。

手術室の条件やお客様のニーズに最適な3シリーズをラインナップ。

### Paramon® Pro (パラモン・プロ)

映像の入出力数が最も多く、4K画質にも対応するハイスペックモデル。



### Paramon® μ (パラモン・マイクロ)

扱いやすくバランスのとれたミドルクラスモデル。

### Paramon® Eco (パラモン・エコ)

必要な機能のみを厳選したエントリーモデル。

※詳細は裏面のスペック表をご覧ください

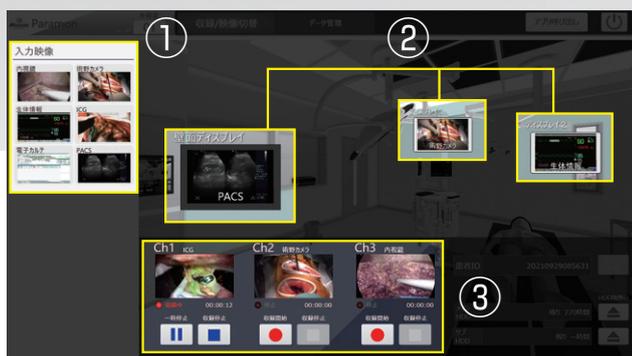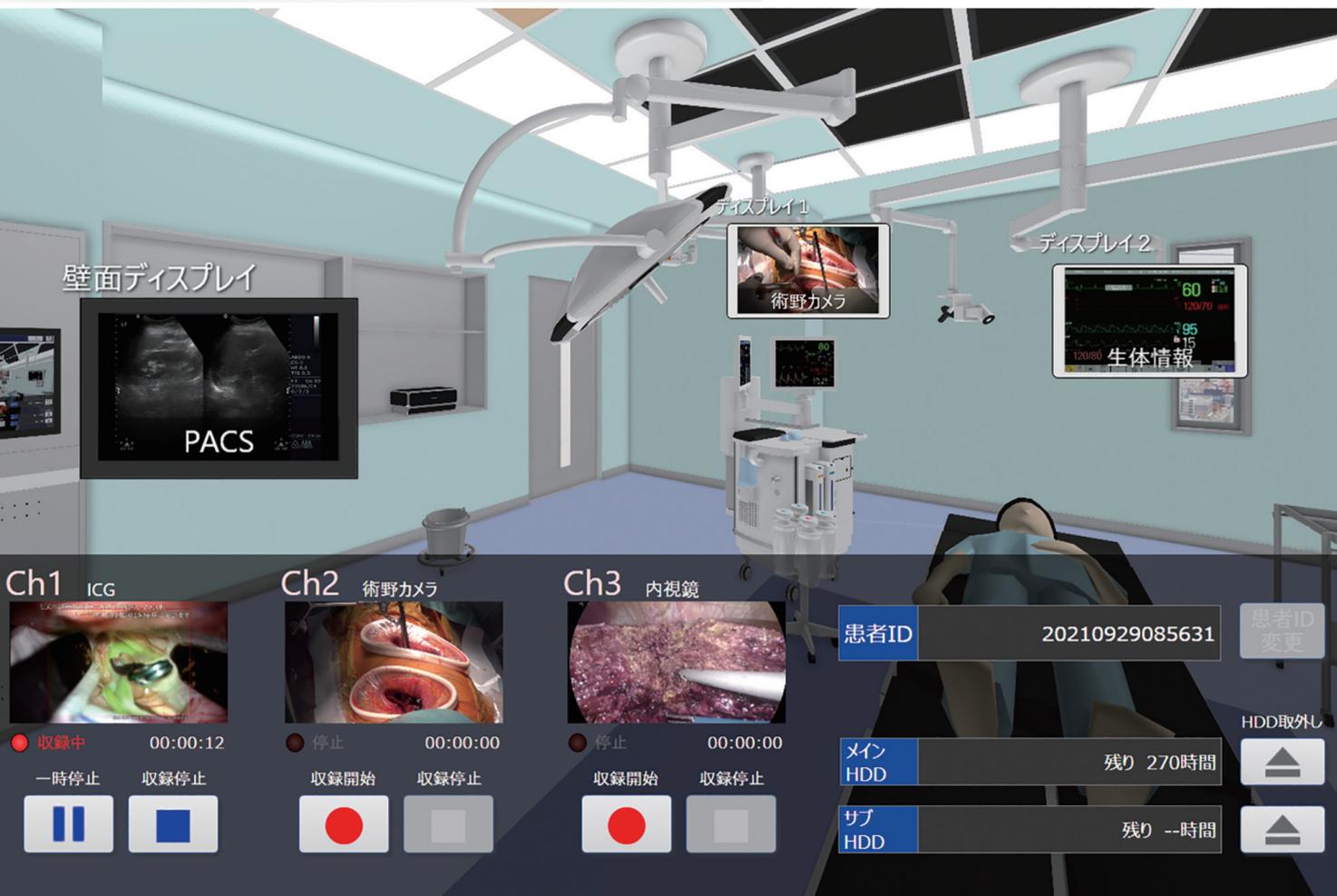

※画面構成は実際の手術室に合わせて作成いたします

### ① 映像ソース表示エリア

手術室内の映像ソースを一括管理。術野カメラ、内視鏡カメラ、電子カルテ、PACS、生体情報などの映像を表示します。

### ●ライブ配信

Paramon®で一括管理されている映像ソースをライブ配信することが可能です。任意の映像ソースを遠隔地でも視聴でき、手術進捗を視覚的に把握、管理運用の効率化が図れます。

### ② 映像出力

Paramon®で一括管理した映像ソースを手術室内のアームディスプレイや壁面モニターに任意に出力。出力したい映像の切替はタッチパネルで簡単に行えるので、ドクターのニーズに合わせた映像切替、手術の進捗把握やスタッフ間の情報共有もスムーズです。

### ③レコーディングエリア

Paramon®で一括管理している映像ソースを録画したいときは、レコーディングエリアに入れて収録開始ボタンをタッチするだけ。タッチパネルの直感操作で簡単に録画ができ、保存された映像は医療安全や教育、学会発表にも活用できます。

※映像はUSB接続のHDDやサーバーに保存可能です。

# Paramon® series

	Paramon® Pro (パラモン・プロ)	Paramon® μ (パラモン・マイクロ)	Paramon® Eco (パラモン・エコ)
入力出力数 (In×out数)	16×16チャンネル	8×8チャンネル	4×4チャンネル
録画チャンネル数	高画質3ch、低画質3ch	高画質3ch、低画質3ch	高画質1ch、低画質1ch
入力映像表示方式	入出力に合わせてポップアップ	入出力に合わせてポップアップ	アイコン固定
インターフェースデザイン	ユニバーサルデザイン	1面完結デザイン	1面完結デザイン
ライブ配信	○	○	○
HIS連携	○	△サーバー連携時のみ	—
4K対応	○	△：お問い合わせください	—
Video Over IP対応	○	△：お問い合わせください	—
消費電力	72W	72W	61W
録画フォーマット	mp4	mp4	mp4

○各商品はシステム構成により商品コードが異なります。詳細は営業担当者までお問い合わせください。

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

### 【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に取扱説明書をよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

